

10月 センサーライトのご紹介

どこでも使える
LEDセンサーライト

マグピカ



※イメージ画像のため、カラーは異なります



- ・人を感知すると自動で点灯・自動で消灯
- ・消し忘れもなく経済的
- ・テーブルや廊下にスタンド可

主な仕様： マグピカ SL50 LEDセンサーライト
電源：単4形アルカリ電池×3本 ※電池は別売りです
電池寿命：夜間AUTO 10か月(1日10回、1回15秒間点灯時)
常時点灯 連続使用で30時間

LED点灯時間：1回感知すると15秒間点灯
本体外形寸法：幅60×高さ110×厚み31mm

販売価格

1,380円(税込)

バディーズ福祉用具サポートセンター

 **BUDDIES, INC.**
バディーズ株式会社

〒329-1104
栃木県宇都宮市下岡本町4060
TEL : 028-688-7915
FAX : 028-688-7916




10月1日は福祉用具の日



平成5年10月1日に「福祉用具法」が施行されたことにちなみ、平成14年度から10月1日を「福祉用具の日」とし、“誰にでもやさしい福祉用具、もっと身近に感じてほしい”というキャッチフレーズのもと、広く関係者と協力して全国一斉に福祉用具の普及活動を行います。

「福祉用具の日」推進協議会より

スライディングシート 移座えもんシートBLACK

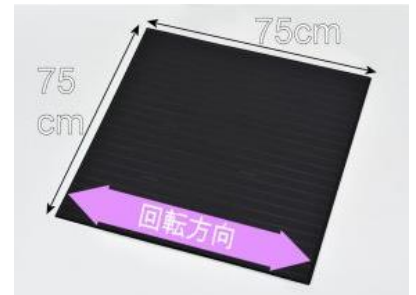

【Mサイズ】

◆ 特徴 ◆

筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングしながら、少しの力でスライドし、移動・移乗を容易にします。

【移座えもんシートの挿入方法】



枕の下からシートを差し込みます。この時背中を丸くすると挿入しやすくなります。



肩甲骨下部まで挿入できない時は、軽く肩を持ち上げ片側ずつ挿入します。

【移座えもんシートの引き抜き方】



枕や身体を支えながらシート下側を引いてください。特に、体重負荷の少ないところから引き抜いてください。

さまざまな福祉用具を組み合わせることで、ご利用者・介助者の負担が少しでも軽減できますよう、お気軽にご相談ください。